

Новинка:
бабл-гам



VOCO Profluorid® Varnish

ФТОРИДОСОДЕРЖАЩИЙ ЛАК ДЛЯ
ДЕСЕНСИБИЛИЗАЦИИ ЗУБОВ

VOCO Profluorid® Varnish

ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Повышенная чувствительность зубов является широко распространенной проблемой среди населения. В основном, она вызывает у пациентов временные болевые ощущения, которые не всегда упоминаются на приеме у стоматолога. Причиной гиперчувствительности являются, как правило, открытые дентинные каналцы. Следовательно, цель лечения заключается в их длительном запечатывании. VOCO Профлуорид Варниш – это фторидосодержащий лак для эффективной герметизации оголённых дентинных каналцев после препарирования полостей или при повышенной чувствительности шеек зубов.


Состав и действие VOCO Профлуорид Варниш

VOCO Профлуорид Варниш – это лак на основе специальной смолы (колофоний) с содержанием 5 % фторида натрия (соответствует 22.600 ppm фторида). Фторид-ионы вместе с находящимися в каналцах ионами кальция способствуют осаждению фторида кальция, что ведет к надежному запечатыванию дентинных каналцев. Опрос врачей, использующих данный препарат, показал, что более 85 % пациентов отмечали абсолютное отсутствие болевых ощущений уже после первого сеанса терапии с помощью VOCO Профлуорид Варниш.

Наряду с быстрым запечатыванием дентинных каналцев, VOCO Профлуорид Варниш способствует образованию депо фторида кальция на поверхности зубов и длительному образованию фторапатита, что защищает зубы от кислотных атак.



Кроме того, в этом лаке содержится ксилитол. Наряду с улучшением вкусовых характеристик ксилитол обладает доказанным кариостатическим действием.

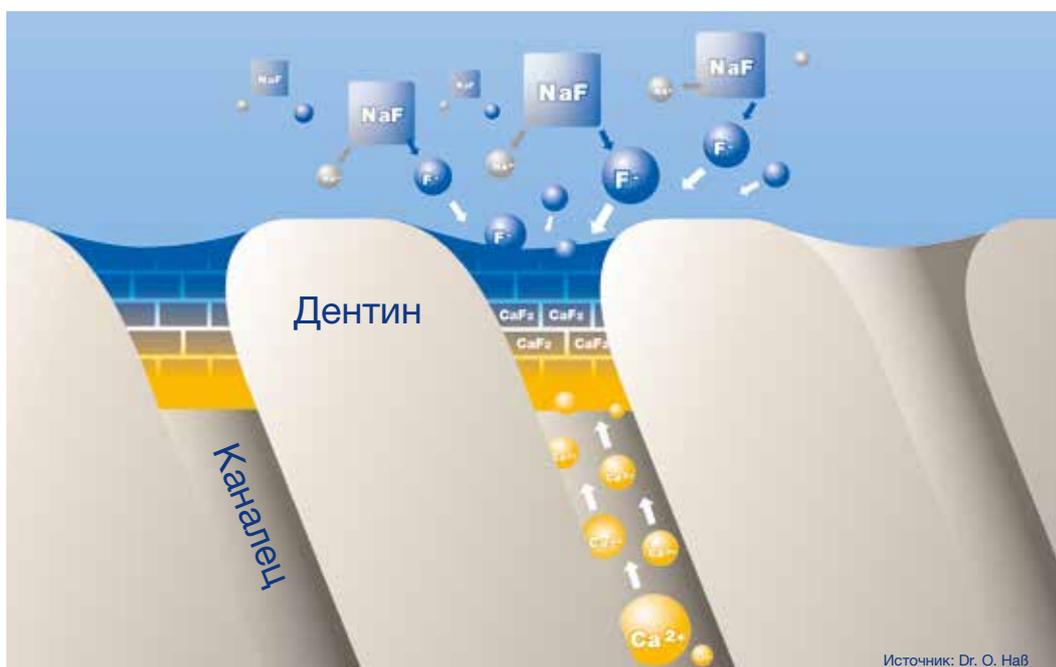

VOCO Profluorid® Varnish

ПРОСТО И ЭСТЕТИЧНО

Простое применение

Колофониевая матрица VOCO Профлуорид Варниш обеспечивает хорошее сцепление, в том числе на влажных поверхностях. Следовательно, предварительное высушивание обрабатываемых поверхностей не требуется, и, таким образом, использование данного препарата в значительной степени экономит время. В результате, готовность к сотрудничеству пациентов с низкой комплаентностью (напр., детей) возрастает.

Эстетика и вкусовые характеристики

VOCO Профлуорид Варниш – это лак под цвет зуба, не оказывающий влияния на эстетику. Профлуорид Варниш выпускается в пяти приятных вкусовых направлениях: бабл-гам и вишня, пользующиеся особенной популярностью у детей и подростков, мята – классический вкус в первую очередь для взрослых, карамель со сливочным вкусом и дыня в качестве экзотического вкусового варианта. Благодаря этим изысканным вкусовым направлениям Вы сможете повысить уровень сервиса и найти индивидуальный подход к Вашим пациентам.



Результаты опроса стоматологов, участвующих в тестировании

Мнение стоматологов

Стоматологи, использующие этот препарат, подтверждают хорошие рабочие и эстетические характеристики VOCO Профлуорид Варниш, причем большинство стоматологов отмечают также его значительное преимущество по сравнению с препаратами-конкурентами. VOCO Профлуорид Варниш

также получил хорошие отзывы среди пациентов. Практически все опрошенные пациенты после лечения отмечали отсутствие жалоб или указывали на значительное улучшение. VOCO Профлуорид Варниш – это намного больше, чем вопрос хорошего вкуса!

Простая и эстетичная десенсибилизация с помощью VOCO Профлуорид Варниш



Преимущества унидозы
Блистерная упаковка Профлуорида Варниша содержит кисточку и лак, благодаря чему возможно гигиенически безукоризненное использование этого препарата.

Применение цилиндрической ампулы



Преимущества цилиндрической ампулы
С помощью зарекомендовавшей себя цилиндрической ампулы возможно как нанесение препарата с миллиметровой точностью, так и проведение полного фторирования в один прием.

VOCO Profluorid® Varnish

У ВАС ЕСТЬ ВЫБОР

Показания

Для обработки гиперчувствительных зубов

Для герметизации дентинных канальцев в препарированных полостях или на чувствительных поверхностях корней



Преимущества

- Бесп проблемное использование на влажных поверхностях
- Эстетичный лак под цвет зуба
- Быстрая десенсибилизация и выделение фторида (5 % NaF \triangleq 22.600 ppm фторида)
- Выпускается в пяти вкусовых направлениях: дыня, мята, вишня, карамель и бабл-гам
- Наносится тонким слоем – экономный расход материала

Преимущества унидозы

- Просто, быстро и гигиенично наносится
- Не требуется дополнительных приспособлений
- Не проливается в любом положении

Преимущества цилиндрической ампулы

- Многократное применение благодаря одноразовым канюлям
- Точная аппликация
- Очень простое применение на апроксимальных поверхностях
- Полное фторирование в один приём

Формы выпуска

Добавка	Унидозы 48 x 0,40 мл	Унидозы 50 x 0,25 мл	Унидозы 50 x 0,40 мл	Унидозы 200 x 0,40 мл	Туба 10 мл	Туба 50 мл	Цилиндр. ампула 5 x 1,70 мл
Дыня	–	REF 1268	REF 1269	REF 1271	REF 1267	REF 1272	REF 2235
Карамель	–	–	REF 2226	REF 2229	REF 2232	–	–
Вишня	–	–	REF 2227	REF 2230	REF 2233	–	–
Мята	–	–	REF 2228	REF 2231	REF 2234	–	–
Бабл-гам	–	–	REF 2238	REF 2239	–	–	–
Ассорти	REF 2225	–	–	–	–	–	–
REF 2167	Аппликационные канюли тип 43, 100 штук						

VOCO GmbH
Anton-Flettner-Straße 1-3
27472 Cuxhaven
Германия

Tel.: +49 (0) 4721-719-0
Fax: +49 (0) 4721-719-140

info@voco.com
www.voco.dental

Представлено:

