

# Acroseal Sealer

Силер для корневых каналов

**Прекрасный старт для успешных реставраций!**


**Acroseal от Septodont** - это превосходный силер, который герметизирует канал, устраняя микроподтекание и минимизируя риск неудачи эндодонтического лечения.

- **Acroseal лечит и герметизирует.** Уникальная химическая формула усовершенствованной эпоксидной матрицы, содержащей кальция гидроксид, создает высокий внутриканальный pH во время obturation, что способствует заживлению периапикальных тканей.

- **Acroseal обеспечивает надежную долговременную obturation.** Acroseal обладает высокой адгезией к стенкам канала и гуттаперчевому штифту. Нерастворимость Acroseal в воде обеспечивает надежную obturation без микроподтеканий. Низкая вязкость Acroseal позволяет материалу затекать в дополнительные каналы для полной obturation системы корневых каналов.

- **Безэвгенольная формула.** Acroseal полностью совместим с цементами и материалами для формирования культи, таким образом повышая качество и надежность реставраций.

**Acroseal доступен в шприцах для автоматического замешивания.** Это простая в использовании система обеспечивает получение однородной консистенции пасты всегда и без проблем. Acroseal также доступен в оригинальных тубиках.

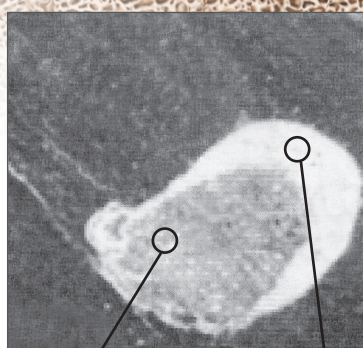

Gutta-percha

Acroseal

Гуттаперча запечатана силером Acroseal в эндодонтически леченом зубе

**Закрепите успех реставраций с Acroseal -  
идеальная комбинация для безопасного лечения!**





## Acroseal доступен в Шприцах Автомикс

Acroseal, превосходный силер для постоянного пломбирования корневых каналов, стал проще в использовании благодаря шприцу с автосмешиванием.

### Новая шприцевая система с одноразовой смешивающей канюлей:

- Гарантирует стабильную гомогенную консистенцию каждый раз
- Исключает неудобное ручное смешивание и очищение инструментов
- Экономит время
- Снижает риск перекрестной контаминации

Acroseal также доступен в оригинальных тубиках

## Характеристики Acroseal

Свойства	Преимущества
Нулевая растворимость в воде	Нерастворимость, obturation без микроподтеков для снижения риска последующих неудач
Адгезия к стенкам канала и гуттаперчевым штифтам	Превосходное качество герметизации для снижения риска реинфицирования
Высокая совместимость	Может использоваться со всеми техниками obturation гуттаперчей, холодная и горячая
Низкая вязкость	Заполнение всех дополнительных канальцев
Усовершенствованная эпоксидная матрица с содержанием кальция гидроксида	Создает высокий уровень pH в корневом канале во время obturation, что помогает ускорить заживление периапикальных тканей
Беззвенольная формула	Совместимость с современными адгезивными техниками реставраций
Химическая полимеризация	Низкая усадка
Отсутствие фенопластных смол	Легкое извлечение с помощью Endosolv E при необходимости повторного эндодонтического лечения
Рентгеноконтрастность	Наблюдение в долгосрочном периоде

## Способ применения

- Покройте гуттаперчевый штифт Acroseal и медленно введите его в канал
- Продолжайте obturation канала по привычной для Вас технике
- Рабочее время - 2 часа
- Время полного отверждения - 24 часа

## Форма выпуска



### Шприц для автоматического замешивания:

2 шприца для автоматического замешивания x 8,6 г, 15 смешивающих насадок, 15 внутривитровых канюль

### Тубики:

1 тубик пасты-основы x 8,5 г,  
1 тубик пасты-катализатора x 9,5 г,  
1 блок для замешивания

Чтобы приобрести Acroseal, свяжитесь с дилером в вашем регионе

